

Atemschutzmaske FFP2 / Respirator mask FFP2



Produktdaten / Description

REF	Typ /type	Farbe / Color	Packung / Package	Karton / Carton	Palette / Pallet
HA-01D	HA PP02	weiß / white	Einzeln verpackt / packed individually 20 Stück pro Box / 20 pcs per box	20 Boxen / 20 boxes	16 Karton / 16 carton

Allgemeine Informationen / General information

Materialzusammensetzung / Material composition

- Mehrlagiges Vlies (PP) / multiple layers of non-woven material (PP)
- Mit Nasenbügel / with nose wire
- Ventil / valve: N/A

Technische Daten / Technical Data

- Maximale gesamte nach innen gerichtete Leckage / Maximum total inward leakage: max. 8 %
- Maximaler Atemwiderstand (bei 160 L/min) / Maximum breathing resistance (at 160 L/min): max. 3 %
- Maximaler Durchlass des Filtermediums / Maximum filter penetration: max. 6 %

Haltbarkeit / Shelf life

4 Jahre bei produktgerechter Lagerung (Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen) /
4 years if stored properly (store in a cool and dry place, protect from sunlight)

Qualitätsstandards / Quality standards

Persönliche Schutzausrüstung nach Verordnung (EU) 2016/425 /
Personal protective equipment according to regulation (EU) 2016/425
EN 149:2001 + A1:2009

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de

Anwendungshinweise




1. Reinigen Sie Ihre Hände mit Seife und Wasser oder Desinfektionsmittel




2. Legen Sie um jedes Ohr eine Schlaufe der Maske



3. Ziehen Sie das obere und untere Ende über Nase und Kinn, damit zwischen dem Gesicht und der Maske keine Lücke entsteht

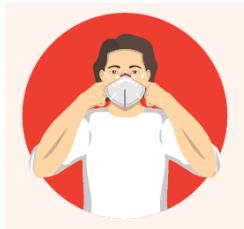

4. Drücken Sie auf das Nasenstück, damit es sich um die Nase schmiegt

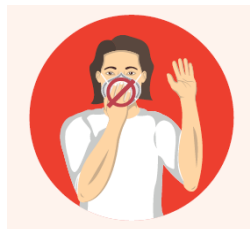

5. Vermeiden Sie das Berühren der Maske während Sie sie tragen

Warnhinweise

1. Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Maske auf sichtbare Beschädigungen, Verschmutzungen und das Verfallsdatum.
2. Die Nichtbeachtung aller Anweisungen und Einschränkungen bei der Verwendung dieses Produkts kann die Wirksamkeit der Atemschutzmaske verringern und zu Krankheit oder Tod führen.
3. Eine richtig ausgewählte Atemschutzmaske ist zum Schutz Ihrer Gesundheit unerlässlich. Wenden Sie sich vor der Verwendung dieser Atemschutzmaske an einen Betriebshygieniker oder Fachmann für Arbeitssicherheit, um die Eignung für den von Ihnen beabsichtigten Gebrauch zu bestimmen. Prüfen Sie die Atemschutzmaske vor der Verwendung stets auf ihren korrekten Sitz.
4. Dieses Produkt liefert keinen Sauerstoff. Verwenden Sie es nur in ausreichend belüfteten Bereichen, die ausreichend Sauerstoff zur Lebenserhaltung enthalten. Verwenden Sie diese Atemschutzmaske nicht, wenn die Sauerstoffkonzentration weniger als 19,5 % beträgt.
5. Nicht verwenden, wenn die Schadstoffkonzentration unmittelbar gesundheits- oder lebensgefährlich ist. Verwenden Sie diese Atemschutzmaske nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen. Verlassen Sie den Arbeitsbereich sofort und kehren Sie an die frische Luft zurück, wenn a) das Atmen schwierig wird oder b) Schwindel oder andere Beschwerden auftreten;
6. Gesichtshaare oder Bärte und bestimmte Gesichtsmarkmalen können die Wirksamkeit dieses Atemschutzgeräts beeinträchtigen.
7. Ändern oder modifizieren Sie diese Atemschutzmaske niemals in irgendeiner Weise.
8. Verwenden Sie die Maske nicht länger als eine Schicht (8 Stunden). Keine Wartung erforderlich.
9. Entsorgen Sie die gebrauchte Atemschutzmaske nach dem Einmalgebrauch.
10. Bewahren Sie die Atemschutzmaske bis zum Gebrauch in der Verpackungsschachtel, geschützt vor direktem Sonnenlicht, auf.

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Status:
2021-04

Instructions for Use




1. Wash your hands using soap and water or hand sanitizer




2. Pull the loops of the mask back to fit them around your ears



3. Pull the upper and lower ends of the mask over nose and chin so that no open gaps remain between face and mask

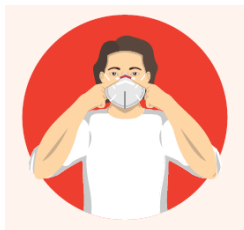

4. Firmly press the nose clip in your mask across nose and cheeks to fit

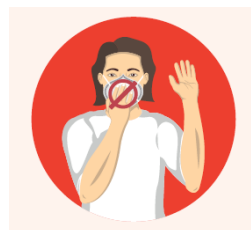

5. Avoid touching the mask while wearing

Warning

1. Please check the mask for visible damage, dirt and the expiry date before use.
2. Failure to follow all instructions and limitations on the use of this product could reduce the effectiveness of protective respirator masks and result in sickness or death.
3. A properly selected protective respirator mask is essential to protect your health. Before using this protective respirator mask, consult an industrial hygienist or occupational safety professional to determine the suitability for your intended use. Always check the protective respirator mask for fit prior to use.
4. This product does not supply oxygen. Use only in adequately ventilated areas containing sufficient oxygen to support life. Do not use this protective respirator mask when oxygen concentration is less than 19.5%.
5. Do not use when concentrations of contaminants are immediately dangerous to health or life. Do not use this protective respirator mask in explosive environment. Leave work area immediately and return to fresh air if, a) breathing becomes difficult, or b) dizziness or other distress occurs;
6. Facial hairs or beards and certain facial characteristics may reduce the effectiveness of this protective respirator mask.
7. Never alter or modify this protective respirator mask in any way.
8. Do not use for more than one shift (8 hours). No maintenance necessary.
9. Discard the used protective respirator mask after single use.
10. Keep protective respirator mask in the packaging box away from direct sunlight until use.

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de